



DE

Airway Medix Oral Care

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1.1. ANWENDUNGSHINWEISE

Diese Anweisungen sind für die Anwendung folgender Produkten bestimmt:

B-Care-Zahnbürste
#32200
4 ml Pipette
#PE

Bevor Sie die **B-CARE-Zahnbürste** verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Bezugnahme auf.

1.2. WICHTIG

- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung von Kindern vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den in dieser Anleitung bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.


1.3. VERWENDUNGSZWECK

- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung von Kindern vorgesehen.
- Die B-Care ist eine Zahnbürste, die zur Erhaltung einer guten Mundhygiene, darunter auch zur Entfernung von Zahnbelag, bestimmt ist. Dieses Produkt enthält die Zahnbürste und zwei Pipetten zum Auffüllen von Flüssigkeiten.

1.4. WARNUNG



- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung von Kindern vorgesehen.
- Das Produkt NICHT zerlegen und ordnungsgemäß lagern.
- NICHT verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Gerät darf nur für den dafür bestimmten Zweck verwendet werden.
- Nicht steril. Versuchen Sie NICHT, dieses Produkt zu sterilisieren oder zu autoklavieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn irgendwelche Teile Anzeichen von Beschädigungen aufweisen. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

2. BESCHREIBUNG

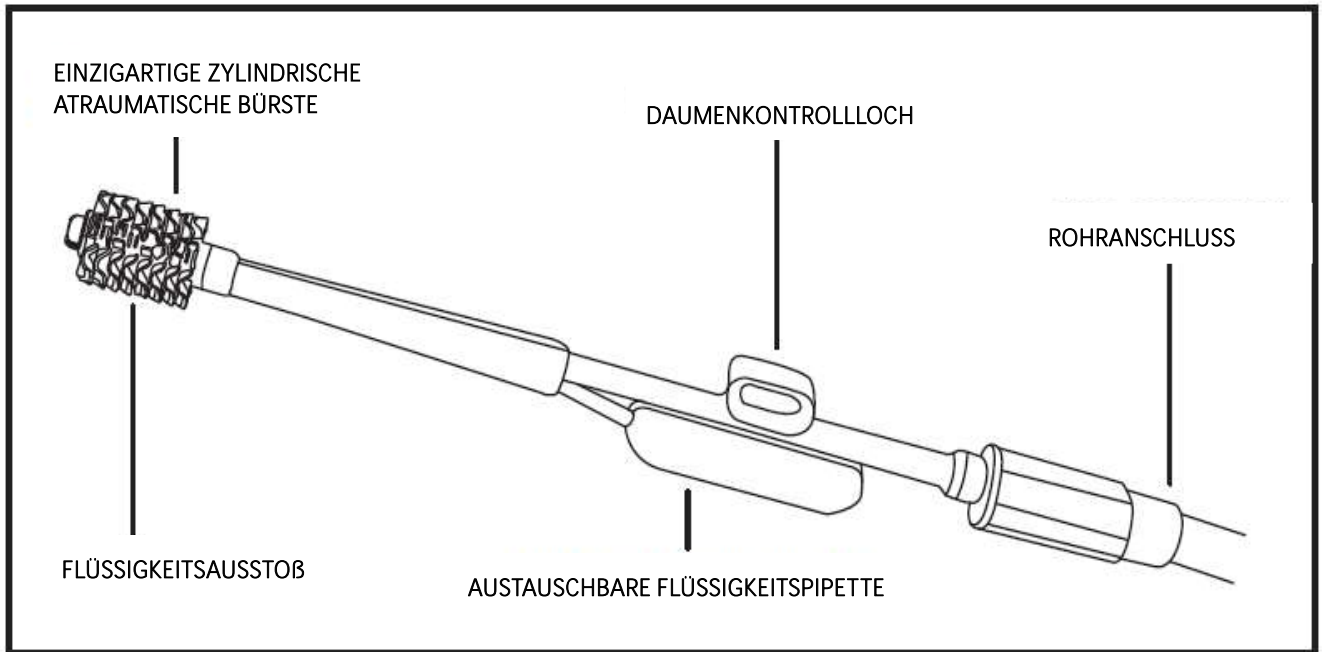


3. B-CARE BEDIENUNGSANLEITUNG

- 3.1. Führen Sie die Pipette ein, um Reinigungsflüssigkeiten zu laden [Abbildung 1].
- 3.2. Schließen Sie die Pipette an die Bürste an [Abbildung 2].

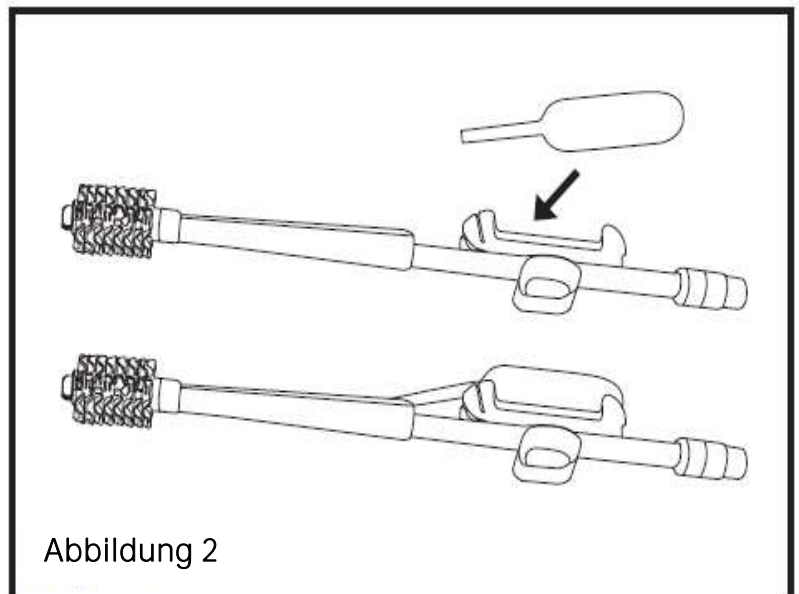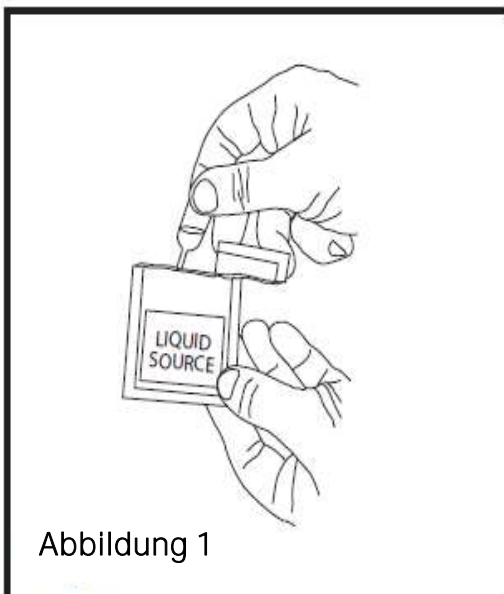

3.3. Halten Sie die Bürste mit dem Daumen am Daumenkontrollloch und mit dem Finger an der Pipette. Tragen Sie Flüssigkeiten auf, indem Sie leicht auf die Pipette drücken [Abbildung 3].

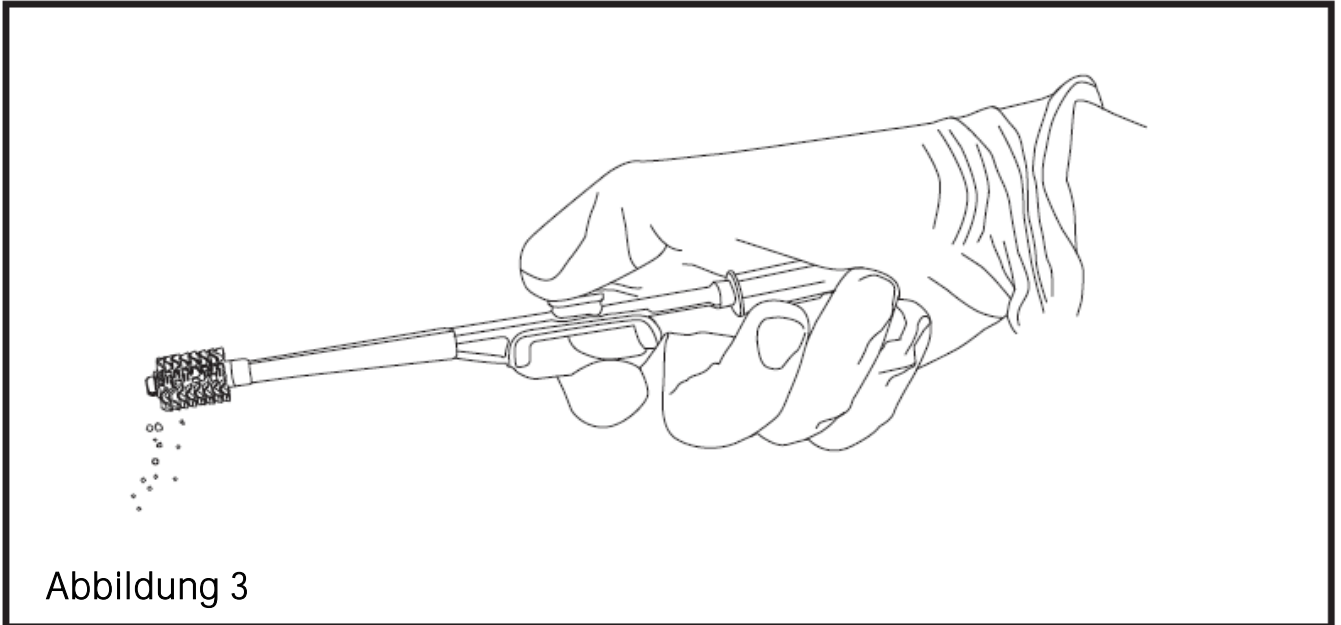

4. GARANTIE

Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf das Produkt, die mit dem Kaufdatum beginnt. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel am Gerät, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, indem wir das komplette Gerät nach unserem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen. Diese Garantie umfasst nicht: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch; gewöhnliche Abnutzung oder Gebrauch; Mängel, die den Wert oder den Betrieb des Gerätes nur unwesentlich beeinflussen. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von nicht autorisierten Personen durchgeführt werden und wenn keine Originalteile von Biovo Technologies verwendet werden. Um innerhalb der Garantiezeit Serviceleistungen zu erhalten, geben Sie das komplette Gerät bei Ihrem Handelsvertreter ab oder senden Sie es ein.

Biovo Technologies Ltd.
23. HaMelacha Stree, POB 11419
Park Afek, Rosch-HaAyin, 4809173, Israel
Tel: (+972) 72-2151115 | Fax: (+972) 72-2151112
E-Mail: info@biovo-tech.com



Hergestellt für:
Airway Medix S.A.
ul. Gen. Józefa Zajęczka 11/14, 01-510 Warszawa, Polen
Tel: +48 22 408 44 80 | E-Mail: info@airwaymedix.pl
In UK zusammengesetzt und verpackt



002-06-LAB Rev.00